

AUSGEZEICHNETE REINIGUNGSLEISTUNG FÜR IHRE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG

Aniosyme DLM Maxi

TRI-ENZYMATISCHER, MILDER, ALKALISCHER REINIGER FÜR EINE HERVORRAGENDE WIEDERAUFBEREITUNG VON INSTRUMENTEN

Aniosyme DLM Maxi ist ein alkalischer Flüssigreiniger für maximale Reinigungswirkung bei der Wiederaufbereitung von chirurgischen Instrumenten. Entwickelt, um intensive Reinigung und hervorragende Materialverträglichkeit zu kombinieren. Aniosyme DLM Maxi ist silikatfrei und kann bei niedrigsten Konzentrationen angewendet werden.

- **STARK** - Intensive Reinigungswirkung für alle Arten von Materialien
- **ENZYMATISCH** - Tri-Enzym Komplex: wirksam bei allen Arten von Verschmutzungen
- **EFFEKTIV** - Hochwirksames alkalisches Produkt. Wirksam ab 5 Minuten



Aniosyme DLM Maxi

Tri-enzymatischer, mild alkalischer Reiniger für eine hervorragende Wiederaufbereitung von Instrumenten



Aniosyme DLM Maxi
5 L Kanister

STARK

Intensive Reinigungswirkung für alle Arten von Materialien (Edelstahl, Titan, Kunststoff, Polysulfone, PVC / ABS, eloxiertes Aluminium usw.).

ENZYMATISCH

Tri-enzym Komplex: Wirksam bei allen Arten von Verschmutzungen für zuverlässige Reinigungsergebnisse.

EFFEKTIV

Hochwirksames alkalisches Produkt, das die RKI-Richtlinien für die Wiederaufbereitung von Medizinprodukten erfüllt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dichte 20°C 1,21g/ml
- pH-Wert* (Konzentrat) 20°C 10,3
- pH-Bereich* (Lösung, 1 - 5ml/L) 20°C 10,1 - 10,6
- Leitfähigkeit (Lösung, 1 - 5ml/L in DI-Wasser) 20°C 0,09 - 0,38mS/cm

*pH-Wert-Messungen unter Betriebsbedingungen immer mit einem pH-Meter mit Temperaturkompensation.

BESTELLINFORMATION

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Aniosyme DLM Maxi Kanister	2 x 5 L	3093860 PZN: 15399278
Aniosyme DLM Maxi Kanister	1 x 10 L	3093880 PZN: 15399284



CE LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Vertrieb durch:
ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ANWENDUNGSGEBIET

Reinigung chirurgischer und medizinischer Ausrüstung und von medizinischen Geräten in automatischen Waschmaschinen und Waschtunneln.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Konzentrat für den professionellen Einsatz.
- Verwenden Sie verdünnte Lösung, zwischen 0,1 und 0,5% mit Wasser, vorzugsweise warm bis heiß, je nach Maschinentyp.
- Bei der verwendeten Anwendungslösung zeigt das Produkt keine Unverträglichkeit mit gängigen Materialien.

INHALTSSTOFFE

Nichtionische und anionische Tenside, Sequestrieremittel, enzymatischer Komplex, Hilfsstoffe.

LAGERUNG


Gefahrgut - Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung (erstellt gemäß den geltenden europäischen Vorschriften für die Einstufung und Kennzeichnung chemischer Produkte). Lagerung: zwischen +5°C und +25°C.

GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne Gutachten zur Verfügung.

MEDIZINPRODUKTE SICHER VERWENDEN

Bitte lesen Sie das Etikett und die Produktinformation.

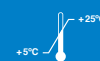

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

